


光合有效辐射传感器 (模拟量型)

SN-300AL-GH-*

Ver 2.0



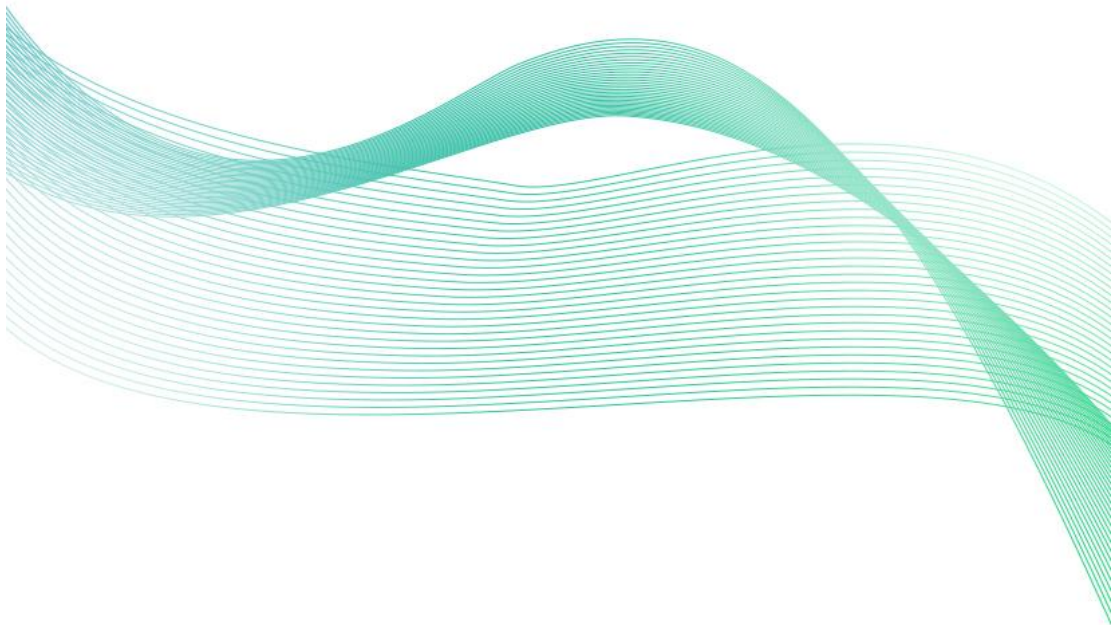

目录

第 1 章 产品简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 功能特点	3
1.3 主要参数	3
1.4 产品选型	4
第 2 章 硬件连接	5
2.1 设备安装前检查	5
2.2 接口说明	5
2.2.1 传感器接线	5
2.2.2 接线方式举例	6
2.3 安装方式	6
第 3 章 计算方法	7
3.1 电流型输出信号转换计算	7
3.2 电压型输出信号转换计算	7
第 4 章 注意事项以及故障排除	7
第 5 章 产品维护	7



第 1 章 产品简介

1.1 产品概述

光合有效辐射传感器采用光电感应原理，4-20mA、0-10V、0-5V 模拟量信号输出可选。传感器采用高精度的光电感应元件，宽光谱吸收，400-700nm 范围内吸收量高，稳定性好；当有光照时，产生一个与入射辐射强度成正比的电压信号，并且其灵敏度与入射光的直射角度的余弦成正比。外壳采用特殊处理，减少灰尘吸附，有效防止环境因素对内部元件的干扰，能够较为精准的测量光合有效辐射量。

外形小巧美观，占用安装空间小。产品广泛应用于气象、农业、大气污染等领域的研究。

1.2 功能特点

- 响应光谱范围 400-700nm
- 采用全铝外壳，防护等级 IP67
- 自带水平仪及调节手轮，现场方便调节
- 宽电压供电 DC7~30V


1.3 主要参数

供电范围	7V~30V DC (0-10V 型只能用 DC 24V 供电)	
最大功耗	电流输出	0.7W
	电压输出	0.7W
输出信号	电流输出	4-20mA
	电压输出	0-5V/0-10V
工作温度	-25°C~70°C	
响应光谱	400nm~700nm	
测量范围	0~2500 $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$	
分辨率	1 $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$	
精确度	$\pm 5\%$ (1000 $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$, @550nm,60%RH,25°C)	
反应时间	10 μs	
线性度	$\leq \pm 1\%$	
年稳定度	$\leq \pm 2\%$	

以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。尽管本产品具有很高的可靠性，但我们建议在使用前检查设备功能是否正常，参数是否达标，确保不影响现场使用。



壳体尺寸

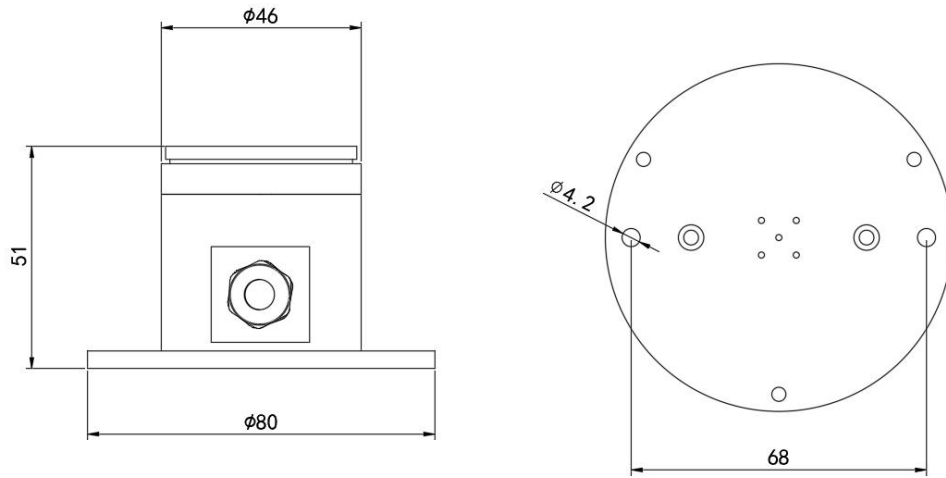

1.4 产品选型

SN-				公司代号
	300AL-			铝制外壳
		GH-		光合有效辐射传感器
			I20	4-20mA 电流输出
			V05	0-5V 电压输出
			V10	0-10V 电压输出

第 2 章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

设备清单：

- 主设备
- 合格证

2.2 接口说明

设备标配是具有 1 路独立的模拟量输出。同时适应三线制与四线制。


宽电压 7~30V 直流电源输入。针对 0-10V 输出型设备只能用 24V 供电。

2.2.1 传感器接线




	线色	说明
电源	棕色	电源正 (7~30V DC)
	黑色	电源负
通信	蓝色	信号正
	绿色	信号负

2.2.2 接线方式举例

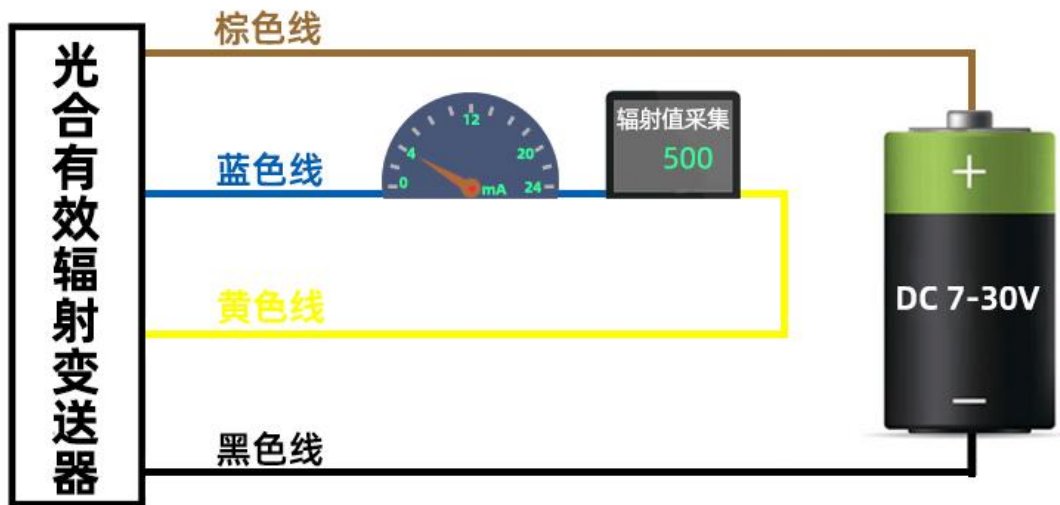

(四线制模拟量输出)

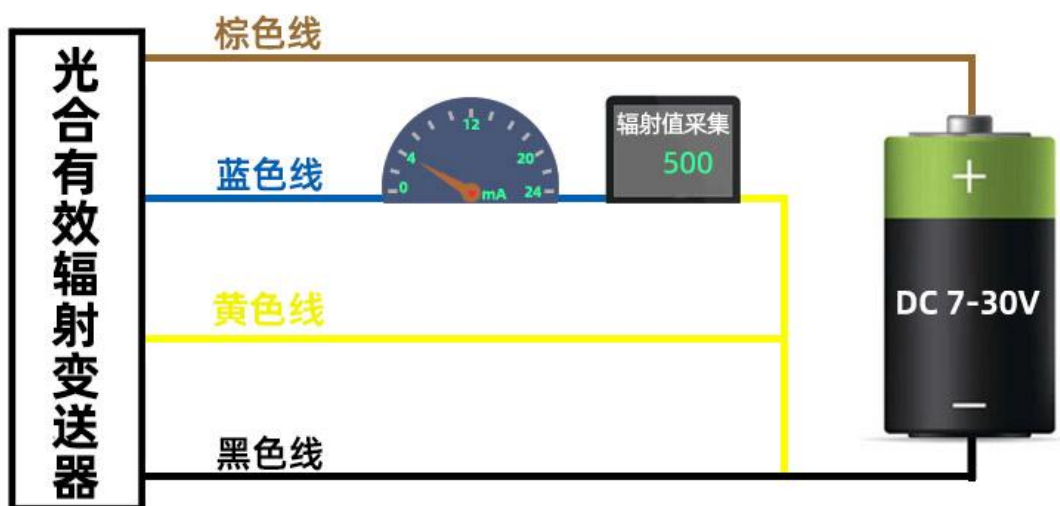

(三线制模拟量输出)

2.3 安装方式

1. 使用螺丝透过传感器上的安装孔，将传感器固定在安装托片上
2. 确保设备与地面平行（可调节手拧螺丝并查看水平泡状态来确定是否平行）
3. 安装完成后，摘除保护盖

第 3 章 计算方法

3.1 电流型输出信号转换计算

例如量程 0-2500 μ mol, 4~20mA 输出, 当输出信号为 12mA 时, 计算当前辐射值。此辐射值量程的跨度为 2500 μ mol, 用 16mA 电流信号来表达, $2500 \mu\text{mol}/16\text{mA}=156.25$, 即电流 1mA 代表温度变化 156.25 μ mol, 测量值 $12\text{mA}-4\text{mA}=8\text{mA}$, $8\text{mA}*156.25=1250\mu\text{mol}$ 。

3.2 电压型输出信号转换计算

例如量程 0-2500 μ mol, 0-10V 输出, 当输出信号为 4V 时, 计算当前辐射值。此辐射值量程的跨度为 2500 μ mol, 用 10V 信号来表达, $2500 \mu\text{mol}/10\text{V}=250\mu\text{mol}$, 即电压 1V 代表温度变化 250 μ mol, 测量值 $4\text{V}*250\mu\text{mol}=1000\mu\text{mol}$ 。

第 4 章 注意事项以及故障排除

无输出或输出错误

可能的原因:

- (1) 接线方式不对或者接线顺序错误。
- (2) 供电电压不对 (针对 0-10V 型均为 24V 供电)。
- (3) 变送器与采集器之间距离过长, 造成信号紊乱。
- (4) 数据采集口损坏。
- (5) 设备损坏。

第 5 章 产品维护

- 1.表面需保持光洁, 定期软布擦拭
- 2.定期检查是否处于水平, 螺丝是否松动